

ADI RÜCKEN

Das Leichtgewicht

Bei den ADI Rücken steht sowohl die optimale Positionierung, als auch ein leichtes Handling bei der Anpassung des Rückens auf die individuellen Bedürfnisse im Vordergrund. Es gibt daher verschiedene Arten der Rücken, so dass jeder Benutzer den für ihn geeigneten Rücken findet. Egal, ob die Unterstützungsfläche höher sein muss oder niedriger. ADI bietet zusätzlich verschiedene Konturtiefen.



Durch das leichte Gewicht verändert das Rückensystem die Fahreigenschaft des Rollstuhls nicht. Das Fortbewegen ist genauso leicht wie ohne festen Rücken. Gerade für sehr aktive Rollstuhlfahrer ist dieses eine wichtige Eigenschaft. So ist bei sportlichen Aktivitäten eine hohe Sitzstabilität gegeben, ohne große Gewichtszunahme des Rollstuhls.



Klar. Leicht. Mit einer Hand zu bedienen.

ADI Rücken

Der ADI Rücken wird in zwei unterschiedlichen Materialien angeboten: Carbon oder Aluminium. Beide Materialien weisen eine hohe Stabilität mit dennoch wenig Gewicht auf.



Geeignet für	Carbon Rücken	Aluminium Rücken
Rollstuhlbreite (cm)	33 – 48 cm	25 – 51 cm
Höhe (cm)	25 / 33 / 41	25 / 33 / 41 / 46 / 51
Tiefe (cm)	6,25 / 10	6,25 / 10 / 15
Gewicht (g)	737 (bei 36 cm Breite und 41 cm Höhe)	822 (bei 38 cm Breite und 48 cm Höhe)
Befestigungsmöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • einstellbar (Tiefe und Winkel), fest montiert (2-Point-Fixed) • einstellbar (Tiefe und Winkel), abnehmbar (Schnellverschluss) 	<ul style="list-style-type: none"> • einstellbar (Tiefe und Winkel), fest montiert (2-Point-Fixed) • einstellbar (Tiefe und Winkel), abnehmbar (Schnellverschluss)

Alle ADI Rücken sind auf Anfrage auch für größere Rollstuhlbreiten lieferbar!

Für den ADI Rücken sind zusätzlich verschiedene Optionen erhältlich:

- Abschwenkbare Pelotten mit kleinem, mittlerem oder großem Polster zur Oberkörperpositionierung
- Feste Pelotten mit kleinem, mittlerem oder großem Polster zur Oberkörperpositionierung
- Lumbalkeil zur Unterstützung der Lendenwirbelsäule
- Transferschlaufe (für abnehmbaren Schnellverschluss-Rücken) zum leichteren Entfernen des Rückens, besonders geeignet bei Personen mit eingeschränkter Fingerfertigkeit



Schnellverschluss

Einfache Handhabung: Mit dem Schnellverschluss kann der Rücken mit nur wenigen Handgriffen entfernt werden. Durch das patentierte System ist es auch Benutzern mit eingeschränkter Fingerfunktion möglich, den Rücken eigenständig zu entfernen und somit auch selbst den Rollstuhl zu verladen.

Dennoch ist es möglich, den Rücken in der Tiefe, der Breite und dem Winkel einzustellen und somit ein optimales Sitzgefühl zu erreichen.



Einhandbedienung, Entriegelungshebel hochklappen und Rücken entfernen.

Schnellverschluss Montage

- Abnehmbar
- Einstellbar (Tiefe und Winkel)

Montage

- Halterung für mehrere Rohrdurchmesser
- keine Distanzscheiben notwendig
- 2-Punkt-Montage mit 4-Punkt-Stabilität

Positionierung

- Winkel: 20°-Einstellung ohne Verlust der Sitzfläche
- Tiefe: Einstellungsbereich ist 31,75 mm
- Breite: ca. 2,5 cm

Passend

- Aluminium und Carbon Rücken
- Aktive und tiefe Kontur
- 25 cm bis 56 cm Rückenbreite
- Alle Höhen



Zusätzlich bietet ADI verschiedene Montagemöglichkeiten, je nachdem, ob der Rücken fest montiert (2-Point-Fixed) oder abnehmbar (Schnellverschluss) sein soll. Oftmals ist bei einem faltbaren Rollstuhl das Problem, dass mit der Montage eines festen Rückensystems der Rollstuhl nicht mehr zu falten ist, d. h. ein Transport erheblich erschwert wird, oder aufwändig ab- und wiederangebaut werden muss.



Aluminium Rücken mit optionaler Transferschleufe

Befestigung

Klemmen für verschiedene Rohrdurchmesser

Keine Distanzscheiben notwendig



1"/25,4 mm
Rundrohr



.750"/19,05 mm
Rundrohr



.600"/15,24 mm
Ovalrohr

Einstellungen

Rücken vor dem Rohr montiert

- A. Maximale Einstellung nach vorne
- B. Maximale Einstellung nach hinten



Rücken in üblicher Weise montiert

(hinter dem Rahmen)


- A. Mitte
- B. Vorwärts (minimale Tiefe)
- C. Rückwärts (maximale Tiefe)



Winklereinstellung

20° Winklereinstellung ohne Verlust von Sitztiefe

10° 0° -10°

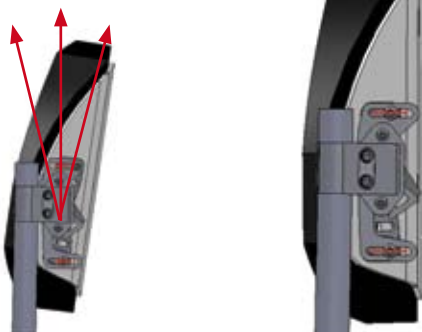

Breiteneinstellung

ca. 2,5 cm Breitenverstellung



T-RV Technik & Reha Vertriebs GmbH

Gewerbering 47
D-76287 Rheinstetten
Tel.: 07242 2579 60
Fax: 07242 2579 610
E-Mail: info@t-rv.de
Internet: www.t-rv.de